


WHITE ROYALE PEROXIDE FREE TEETH WHITENING

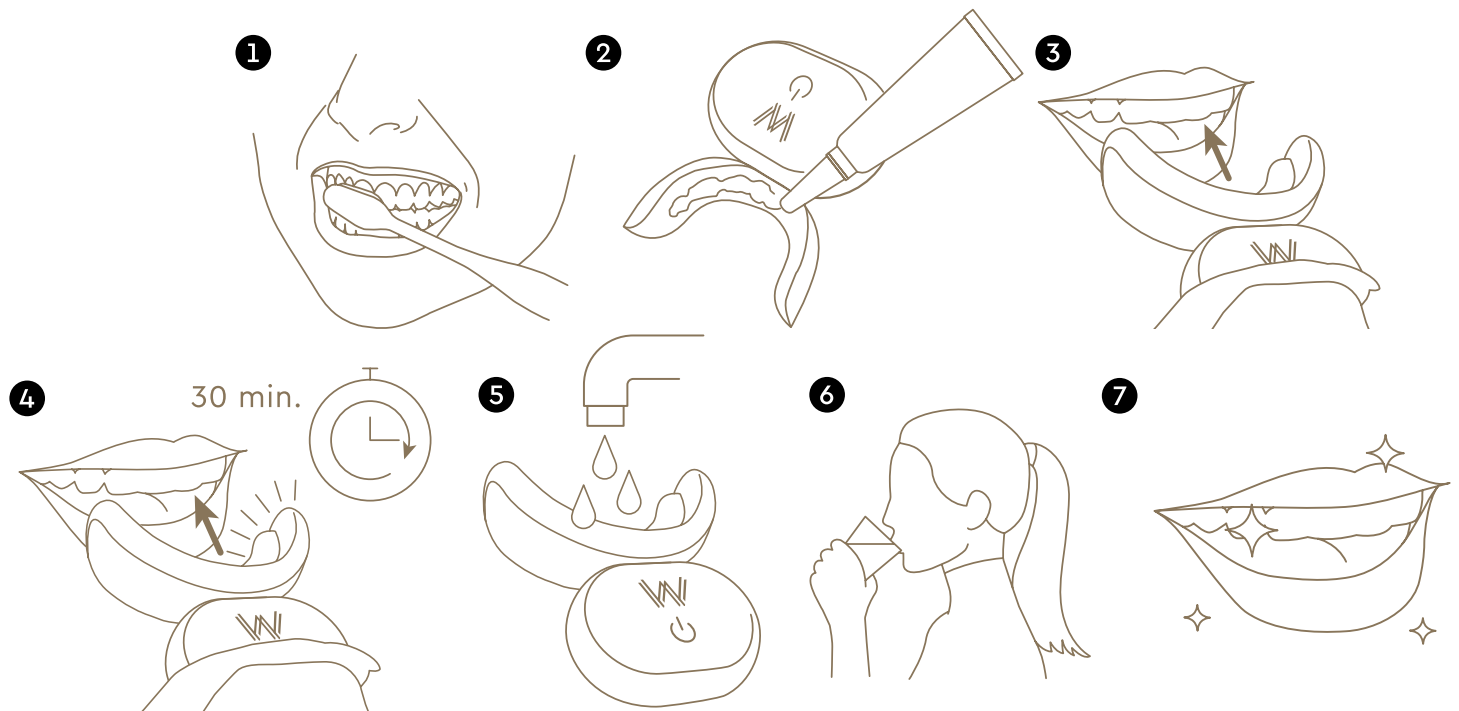

1. Brush your teeth thoroughly.
2. Apply a generous amount of gel to the inside of the mouth tray, focusing on the areas that will be in direct contact with your teeth. Ensure the gel is mainly positioned at tooth level.
3. Place the tray in your mouth and ensure a proper fit.
4. Activate the built-in LED of the tray.
 - a. All color modes function identically.
 - b. The light switches off automatically after 15 minutes.
 - c. Reactivate the light and keep the tray in for a total of 30 minutes.
5. Remove the tray after 30 minutes and rinse it with lukewarm water.
6. Rinse your mouth thoroughly with lukewarm water.
7. Check the result and enjoy a fresher, brighter smile.

DESCRIPTION

Cavex Peroxide Free Teeth Whitening is a powerful yet gentle treatment that delivers a visibly whiter, more radiant smile in just a few applications. The peroxide-free gel whitens teeth without causing sensitivity and helps prevent new discoloration.

INDICATIONS FOR USE

White Royale Peroxide Free Teeth Whitening is a whitening product intended to lighten the color of natural teeth. Suitable for individuals aged 18 and over. A consultation with a qualified dentist is recommended prior to treatment to check for any underlying oral or health issues.

WARNINGS

Avoid contact with eyes. Keep out of reach of children. Do not use on hypersensitive teeth.


STORAGE INSTRUCTIONS

Store in a dark, dry place. Avoid exposure to direct sunlight or high temperatures. Keep refrigerated when not in use. Limited shelf life after opening.

WHITE ROYALE PEROXIDE FREE TEETH WHITENING


INGREDIENTS

Glycerin, Water (Aqua), Phthalimidoperoxycaproic Acid (PAP), Sorbitol, Erythritol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Sodium Polyphosphate, PVP, Menthol, Eucalyptol, Potassium Hydroxide.

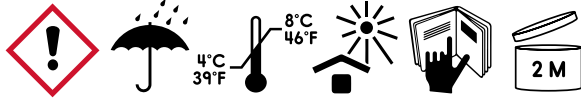

 Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031CJ Haarlem
The Netherlands
T +31 23 5307700
dental@cavex.nl
cavex.nl

WHITE ROYALE PEROXIDE FREE TEETH WHITENING

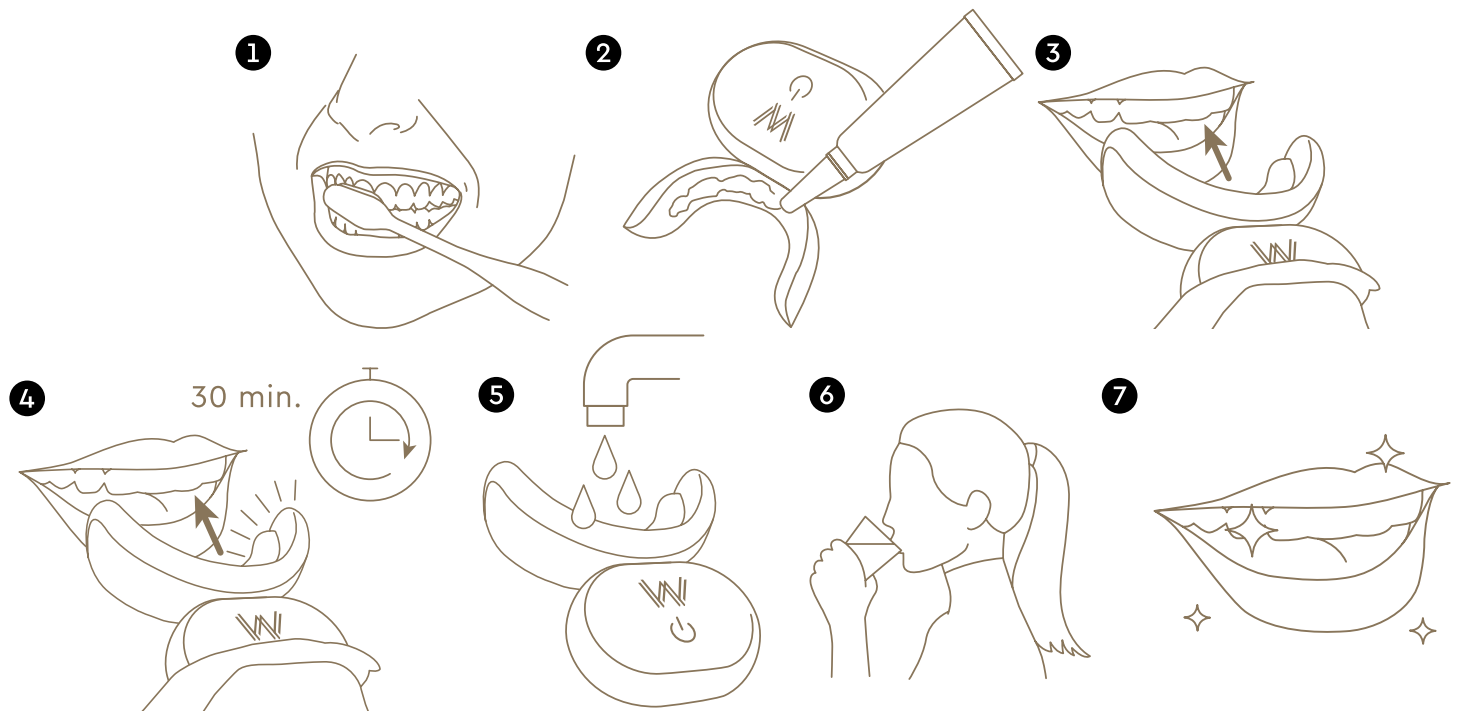

1. Poets uw tanden grondig.
2. Breng een royale hoeveelheid gel aan op de binnenzijde van het bitje, gericht op de zones die direct contact maken met uw tanden. Zorg dat de gel zich voornamelijk op tandhoogte bevindt.
3. Plaats het bitje in uw mond en zorg voor een goede pasvorm.
4. Activeer de ingebouwde led van het bitje.
 - a. Alle kleurstanden functioneren identiek.
 - b. Het licht schakelt automatisch uit na 15 minuten.
 - c. Activeer het licht opnieuw en houd het bitje in totaal 30 minuten in.
5. Verwijder het bitje na 30 minuten en spoel het af met lauw water.
6. Spoel uw mond zorgvuldig met lauw water.
7. Controleer het resultaat en geniet van een frissere en heldere glimlach.

OMSCHRIJVING

Cavex Peroxide Free Teeth Whitening is een krachtige, maar zachte behandeling die zorgt voor een stralend wittere glimlach in slechts enkele toepassingen. De peroxidevrije gel maakt tanden witter zonder gevoeligheid te veroorzaken en helpt bovendien nieuwe verkleuring te voorkomen.

GEBRUIKSINDICATIES

White Royale Peroxide Free Teeth Whitening is een whitening product dat wordt gebruikt om de kleur van natuurlijke tanden te verlichten. Geschikt voor personen van 18 jaar en ouder. Voorafgaand aan de whitening-behandeling wordt een consult bij een gekwalificeerde tandarts aanbevolen om eventuele onderliggende mond- of gezondheidsproblemen te controleren.

WAARSCHUWINGEN

Contact met de ogen vermijden. Buiten bereik van kinderen houden. Niet gebruiken bij overgevoelige tanden.


BEWAARADVIES

Bewaren op een donkere, droge plaats. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht of hoge temperaturen. Koel bewaren wanneer niet in gebruik. Beperkte houdbaarheid na opening.

WHITE ROYALE PEROXIDE FREE TEETH WHITENING


INGREDIËNTEN

Glycerine, Water (Aqua), Phthalimidoperoxycaproic Acid (PAP), Sorbitol, Erythritol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Natriumpolyfosfaat, PVP, Menthol, Eucalyptol, Kaliumhydroxide.

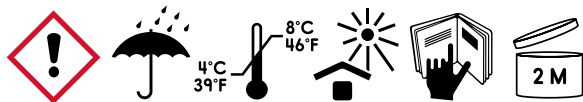

 Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031CJ Haarlem
The Netherlands
T +31 23 5307700
dental@cavex.nl
cavex.nl

WHITE ROYALE PEROXIDE FREE TEETH WHITENING

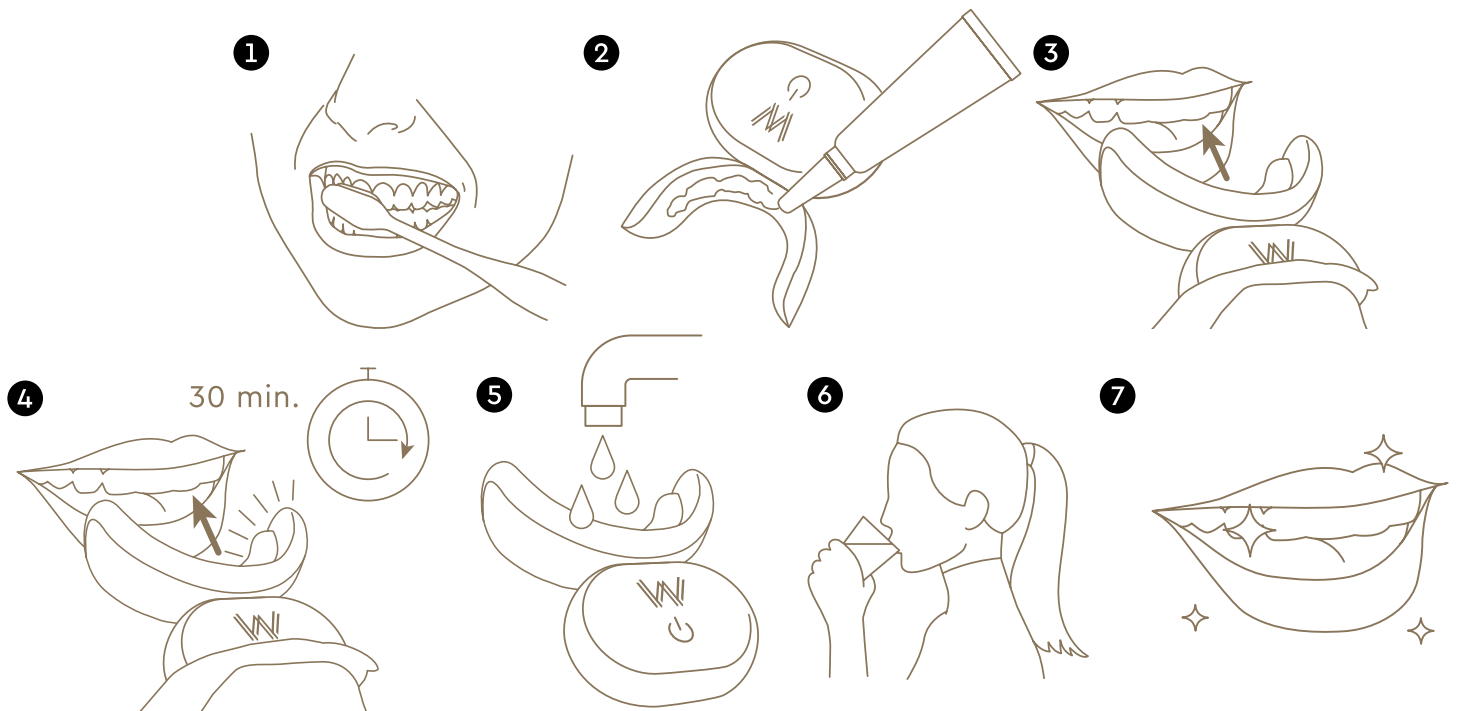

1. Putzen Sie Ihre Zähne gründlich.
2. Tragen Sie eine großzügige Menge Gel auf die Innenseite der Mundschiene auf und achten Sie dabei besonders auf die Bereiche, die direkten Kontakt zu Ihren Zähnen haben werden. Achten Sie darauf, dass das Gel hauptsächlich auf Zahnhöhe aufgetragen wird.
3. Legen Sie die Schiene in den Mund und achten Sie darauf, dass sie richtig sitzt.
4. Aktivieren Sie die in die Schiene integrierte LED.
 - a. Alle Farbmodi funktionieren identisch.
 - b. Das Licht schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus.
 - c. Aktivieren Sie das Licht erneut und tragen Sie die Schiene insgesamt 30 Minuten lang.
5. Entfernen Sie die Schiene nach 30 Minuten und spülen Sie sie mit lauwarmem Wasser ab.
6. Spülen Sie Ihren Mund gründlich mit lauwarmem Wasser aus.
7. Überprüfen Sie das Ergebnis und freuen Sie sich über ein frischeres, strahlenderes Lächeln.

BESCHREIBUNG

Cavex Peroxide Free Teeth Whitening ist eine wirksame und dennoch sanfte Behandlungsmethode, die bereits nach wenigen Anwendungen für ein sichtbar weißeres, strahlenderes Lächeln sorgt. Das peroxidfreie Gel hellt die Zähne auf, ohne zu einer Empfindlichkeit zu führen, und trägt zur Vorbeugung vor neuen Verfärbungen bei.

ANWENDUNGSHINWEISE

White Royale Peroxide Free Teeth Whitening ist ein Zahnaufhellungsprodukt, das zur Aufhellung der Farbe natürlicher Zähne bestimmt ist. Geeignet für Personen ab 18 Jahren. Vor der Behandlung wird die Konsultation eines qualifizierten Zahnarztes empfohlen, um etwaige grundlegende Mund- oder Gesundheitsprobleme festzustellen.

WARNHINWEISE

Augenkontakt vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht bei überempfindlichen Zähnen verwenden.


AUFBEWAHRUNGSHINWEISE

Kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen vermeiden. Bei Nichtgebrauch im Kühlschrank aufbewahren. Begrenzte Haltbarkeit nach dem Öffnen.

WHITE ROYALE PEROXIDE FREE TEETH WHITENING


INHALTSSTOFFE

Glycerin, Wasser (Aqua), Phthalimidoperoxycapronsäure (PAP), Sorbit, Erythrit, Ammoniumacryloyldimethyltaurat/VP-Copolymer, Natriumpolyphosphat, PVP, Menthol, Eucalyptol, Kaliumhydroxid.

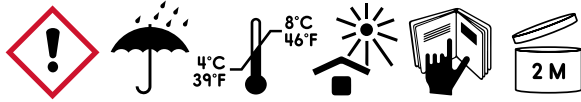

 Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031CJ Haarlem
The Netherlands
T +31 23 5307700
dental@cavex.nl
cavex.nl

WHITE ROYALE PEROXIDE FREE TEETH WHITENING

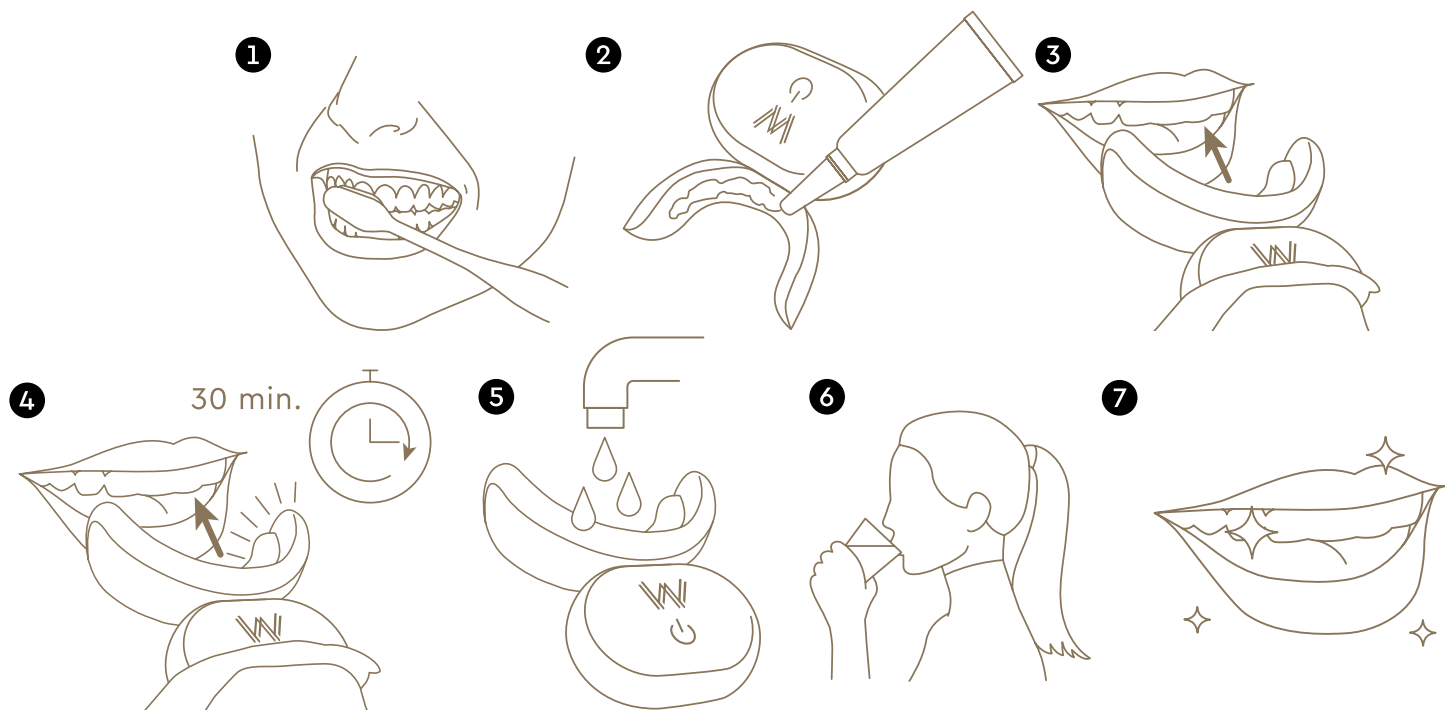

1. Brossez-vous soigneusement les dents.
2. Appliquez une quantité généreuse de gel à l'intérieur de la gouttière, en insistant sur les zones qui seront en contact direct avec vos dents. Veillez à ce que le gel soit principalement appliqué au niveau des dents.
3. Placez la gouttière dans votre bouche et assurez-vous qu'elle est bien ajustée.
4. Activez la LED intégrée à la gouttière.
 - a. Tous les modes de couleur fonctionnent de manière identique.
 - b. La lumière s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes.
 - c. Réactivez la lumière et gardez la gouttière en place pendant 30 minutes au total.
5. Retirez la gouttière au bout de 30 minutes et rincez-la à l'eau tiède.
6. Rincez-vous soigneusement la bouche à l'eau tiède.
7. Vérifiez le résultat et profitez d'un sourire plus frais et plus éclatant.

DESCRIPTION

Cavex Peroxide Free Teeth Whitening est un traitement puissant mais doux qui permet d'obtenir un sourire visiblement plus blanc et plus éclatant en seulement quelques applications. Ce gel sans peroxyde blanchit les dents sans provoquer de sensibilité et aide à prévenir l'apparition de nouvelles décolorations.

MODE D'EMPLOI

White Royale Peroxide Free Teeth Whitening est un produit de blanchiment dentaire conçu pour éclaircir la couleur des dents naturelles. Convient aux personnes âgées de 18 ans et plus. Il est recommandé de consulter un dentiste qualifié avant le traitement afin de vérifier l'absence de tout problème bucco-dentaire ou de santé sous-jacent.

AVERTISSEMENTS

Éviter tout contact avec les yeux. Garder hors de portée des enfants. Ne pas utiliser sur des dents hypersensibles.


INSTRUCTIONS DE CONSERVATION

Conserver dans un endroit sombre et sec. Éviter toute exposition directe à la lumière du soleil ou à des températures élevées. Conserver au réfrigérateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Durée de conservation limitée après ouverture.

WHITE ROYALE PEROXIDE FREE TEETH WHITENING

INGRÉDIENTS

Glycérine, eau (Aqua), acide phtalimidoperoxyacproïque (PAP), sorbitol, érythritol, copolymère d'acryloyldiméthyltaurate d'ammonium/vp, polyphosphate de sodium, PVP, menthol, eucalyptol, hydroxyde de potassium.

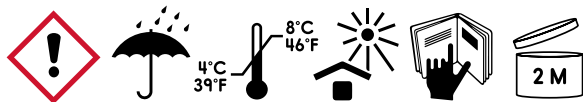

 Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031CJ Haarlem
The Netherlands
T +31 23 5307700
dental@cavex.nl
cavex.nl

CAVEX